



Báscula para sillas de ruedas validada por HCE con tercera rampa opcional

seca XLine Base

- + Dimensiones XXL y capacidad para acomodar sillas de ruedas bariátricas
- + Construido para soportar las cargas más elevadas con una capacidad de 500 kg
- + El perfil extra bajo garantiza una transición suave y segura para el acceso de sillas de ruedas a la plataforma
- + Tercera rampa disponible: Actualice su seca XLine y mejore aún más la accesibilidad
- + Adapte su experiencia eligiendo entre la pantalla básica con interfaz RS-232 opcional o la ID-Display™ con interfaz HCE
- + Tara por escaneado: Simplifique el proceso de pesaje tarando el peso de la silla de ruedas escaneando su código de barras
- + Opcional: Pasamanos con revestimiento antimicrobiano para mejorar la seguridad o para utilizarlo como ayuda para estar de pie
- + Validada por HCE: Transmite los datos medidos directamente a cualquier sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) o a una impresora

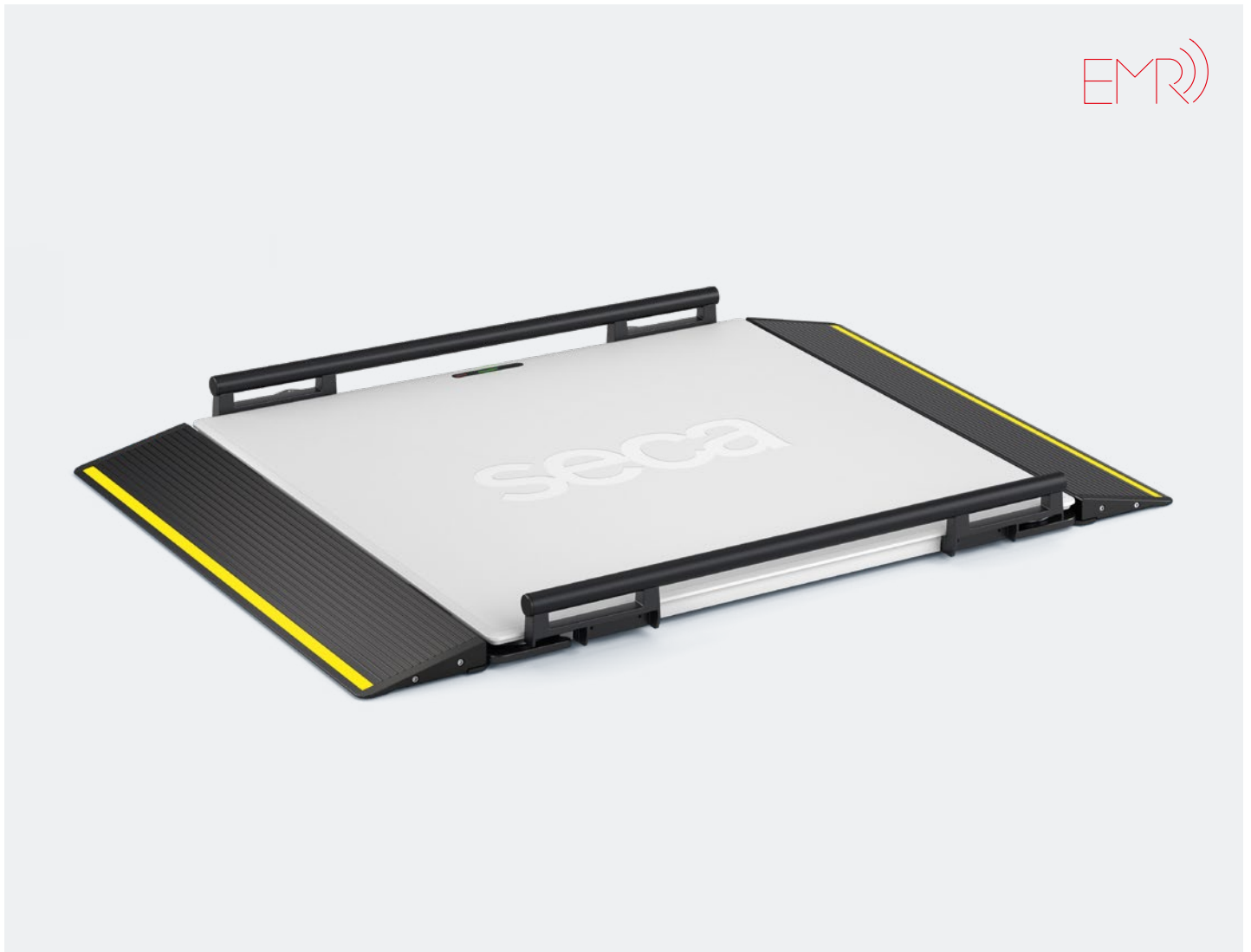

Báscula para sillas de ruedas validada por HCE con tercera rampa opcional

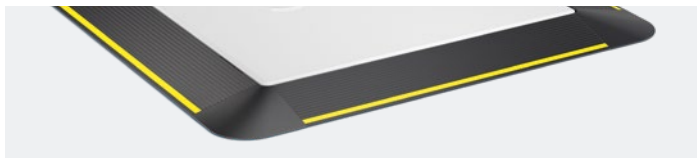

Pesaje sin esfuerzo para pacientes bariátricos

Presentamos seca XLine, un avance en la tecnología de pesaje médico que redefine el estándar para pesar individuos en sillas de ruedas. Nuestra innovación combina un perfil notablemente delgado, alta capacidad y una plataforma amplia, asegurando un pesaje cómodo y sencillo para individuos en sillas de ruedas, inclusive con sillas eléctricas. Este avance no solo simplifica las tareas del personal de salud, sino que también promueve un cuidado rápido, seguro e ininterrumpido del paciente.

Capacidad	500 kg / 1.100 lbs
Graduación	100 g / 0,2 lb
Dimensiones (AxAxP)	1.523 x 117 x 1.220 mm / 60 x 4,6 x 48 in
Dimensiones plataforma (AxAxP)	1.100 x 54,6 x 1.100 mm / 43,3 x 2,2 x 43,3 in
Peso neto	55,4 kg / 122,1 lbs
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente
Longitud del cable	3 m / 118 in
Funciones	Visualización del nombre o ID del usuario y del paciente, Visualización fecha de nacimiento paciente, TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, CLEAR, Auto-CLEAR, RESET, Amortiguación ajustable, IMC, BSA (Área superficie corporal), Modo de espera
Interfaces	Ethernet, USB para escáner de código de barras, Wi-Fi

Precisión redefinida con tara por escaneo

Diseñada con la seguridad en mente, seca XLine supera las expectativas para simplificar el proceso de pesaje para individuos en sillas de ruedas. La plataforma grande proporciona espacio suficiente, las barandillas previenen el deslizamiento accidental, y detalles como el soporte magnético de la pantalla montado en la pared y una rampa adicional opcional facilitan el flujo de trabajo. La función de tara por escaneo agiliza aún más la carga de trabajo al tarar sin esfuerzo el peso pre-almacenado de la silla de ruedas mediante el escaneo del código de barras.



Interfaces personalizadas para un flujo de trabajo sin interrupciones

En búsqueda de una mayor eficiencia y procesos sin errores, seca XLine está totalmente validada para integración con diversos sistemas EMR. Cuando se integra, la pantalla ID muestra información esencial como el nombre o ID del paciente y del usuario, junto con la fecha de nacimiento. Para aquellos que optan por no integrar EMR o tara por escaneo, está disponible una pantalla básica con una interfaz RS-232 opcional. Esta flexibilidad asegura que siempre tenga la interfaz que se alinea perfectamente con sus necesidades específicas.

Báscula de plataforma seca 604	•	•	•	•	•	•
+ Dos rampas seca 404	•	•	•	•	•	•
+ Barandilla de seguridad seca 446	•	•	•	•	•	•
+ Barandilla de seguridad con ruedas seca 448	•	•	•	•	•	•
+ Soporte de pantalla seca 476	•	•	•	•	•	•
+ Tercera rampa seca 405	•	•	•	•	•	•
+ Pantalla básica seca 495	•	•	•	•	•	•
+ Pantalla básica RS-232 seca 495 r	•	•	•	•	•	•
+ ID-Display™ seca 496	•	•	•	•	•	•

Código de pedidos ON SWX INB NN ON SWX INR NN ON SWX INT NN ON SWX ICB NN ON SWX ICR NN ON SWX ICT NN

seca américa latina
Carrera 17 No. 89 – 31
Edificio GAIA – Oficina 905
110221 Bogotá
Colombia
T +57 601 773 0698
E info.latam@seca.com

seca méxico
Centeotl Núm 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México
T +52 55 5567 8537 ó
+52 55 5567 5189
E info.mx@seca.com

seca alemania
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburgo
Alemania
T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com