

# Báscula validada por HCE para camas y camillas de hospital


**seca**  
Precisión para la salud

## seca XLine Stretch

- + Dimensiones XXL para acomodar camas de hospital y camillas con facilidad
- + Construido para soportar las cargas más elevadas con una capacidad de 1.000 kg
- + Pesar a los pacientes de forma rápida y segura durante ingresos de urgencia o diálisis
- + Elimine la necesidad de estimar el peso de los pacientes encamados, péselos de forma cómoda y precisa
- + Tara por escaneado: Simplifique el proceso de pesaje tarando el peso de la camilla o cama escaneando su código de barras
- + El perfil extra bajo garantiza una transición suave y segura para empujar camas y camillas a la plataforma
- + Tras la identificación con un escáner de código de barras, la pantalla de identificación muestra el ID del paciente, el ID de usuario y la fecha de nacimiento.
- + Validada por HCE: Transmite los datos medidos directamente a cualquier sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) o a una impresora




## Báscula validada por HCE para camas y camillas de hospital

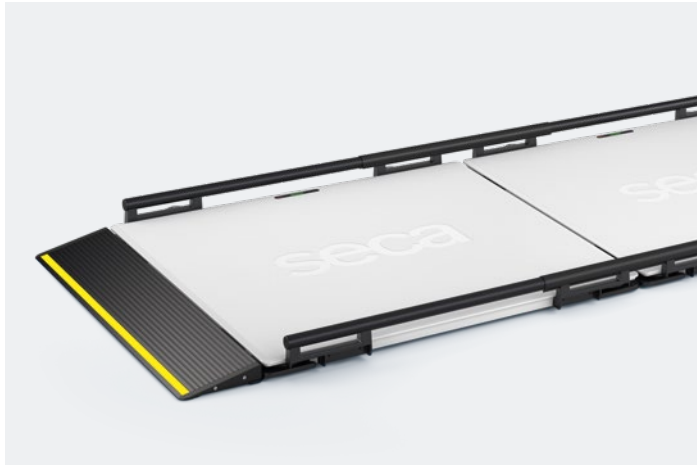

### Pesaje de precisión en todas las situaciones

Potencia tus capacidades de atención médica y despídete de las estimaciones de peso basadas en la vista con el avanzado seca XLine Stretch. Diseñado para pesar a individuos en sillas, camas y camillas, esta solución innovadora prioriza la comodidad de los pacientes y el personal de salud mientras entrega resultados de peso con una precisión sin igual. Ya sea durante la diálisis, admisiones de emergencia o momentos críticos cuando el pesaje de pacientes encamados es sensible en el tiempo, el seca XLine Stretch asegura un proceso libre de interrupciones.

Capacidad	1.000 kg / 2.200 lbs
Graduación	100 g / 0,2 lb
Dimensiones (AxAxP)	2.634 x 119 x 1.226 mm / 103,7 x 4,7 x 48,3 in
Dimensiones plataforma (AxAxP)	2.200 x 54,6 x 1.100 mm / 86,6 x 2,2 x 43,3 in
Peso neto	97,7 kg / 215,4 lbs
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente
Longitud del cable	3 m / 118 in
Funciones	Visualización del nombre o ID del usuario y del paciente, Visualización fecha de nacimiento paciente, TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, CLEAR, Auto-CLEAR, RESET, Amortiguación ajustable, IMC, BSA (Área superficie corporal), Modo de espera
Interfaces	Ethernet, USB para escáner de código de barras, Wi-Fi

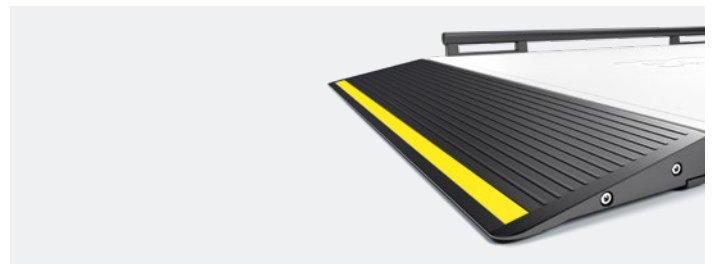

### Una nueva dimensión en la atención al paciente

El seca XLine Stretch introduce una nueva dimensión en la atención al paciente, acomodando camas y camillas sin esfuerzo con sus amplias dimensiones. El ángulo de rampa ultra bajo y las barandillas garantizan el movimiento seguro y suave de camas y camillas a la plataforma, aliviando el estrés para los pacientes encamados. La función Tara por escaneo simplifica el proceso de pesaje al eliminar automáticamente el peso pre-almacenado de camas o camillas mediante escaneo de código de barras. Características adicionales, incluido el soporte magnético de la pantalla, aceleran el proceso de pesaje, haciéndolo no solo fácil, sino también preciso y altamente eficiente.



### Integración directa validada por HCE

Para mejorar la eficiencia, eliminar errores de transcripción y fomentar un ambiente sin incidentes, el seca XLine Stretch está completamente validado para muchos sistemas HCE. Cuando se integra en tu EMR, la pantalla de identificación muestra el nombre o la ID del paciente y del usuario, así como la fecha de nacimiento. Con solo presionar un botón, envías los valores medidos directamente al archivo digital del paciente correcto, haciendo que los datos de peso estén accesibles para todos los involucrados en el curso del tratamiento.

### Código de pedido **ON SBX INT NN**

- 2x Báscula de plataforma (110 x 110 cm) seca 604
- + Dos rampas seca 404
- + 2x Barandilla de seguridad seca 446
- + 2x Barandilla de seguridad con ruedas seca 448
- + Kit de conexión seca 438
- + Soporte de pantalla seca 476
- + ID-Display™ seca 496

seca américa latina  
Carrera 17 No. 89 – 31  
Edificio GAIA – Oficina 905  
110221 Bogotá  
Colombia

T +57 601 773 0698  
E info.latam@seca.com

seca méxico  
Centeotl Núm 223-A  
Col. Industrial San Antonio  
02760 Ciudad de México  
México

T +52 55 5567 8537 ó  
+52 55 5567 5189  
E info.mx@seca.com

seca alemania  
seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3–25  
22089 Hamburgo  
Alemania

T +49 40 20 00 00 0  
F +49 40 20 00 00 50  
E info@seca.com